

braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADA
HEALTHCARE



< timeto relax



AURA

QUICK MANUAL | SETUP ASSEMBLY



< timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir gratulieren!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Massagesessel der Casada Familie entschieden haben. Wir freuen uns Ihren persönlichen Gesundheitsanspruch unterstützen zu können.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie die korrekte Handhabung und Funktionsweise im Detail kennenlernen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung Ihres persönlichen **AURA** Massagesessels.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Kontraindikationen	5
Ausstattung Funktionen	6
Vorbereitung für den Gebrauch	7
Fernbedienung	8
Aufbau und Montage	10
Reinigung Pflege Lagerung	13
Störungssuche	14
Technische Daten	14
EU-Konformitätserklärung	15
Gewährleistungsbestimmungen	15

Sicherheitshinweise



Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel verfügt über beheizte Bereiche. Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren sollten vor und während der Benutzung vorsichtig sein. (ICE 60335-2-32)
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massagerollen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeeengt oder an einem Platz steht an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromversorgung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder losen Fassungen.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Reinigung und Wartung darf von Kindern unter 14 Jahren nicht ohne Aufsicht ausgeführt werden.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenen Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Bei feuchten oder beschädigten elektrischen Kabeln dürfen Sie den Massagesessel nicht betreiben.
- Wenn Kinder unter 14 Jahren, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht, direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.
- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden und Selbstverletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht auf Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass sich darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder unter 14 Jahren.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Bei Beschädigung des flexiblen Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel verwendet werden oder beim Hersteller oder dessen Wartungsstelle zum Austausch erworben werden.

Kontraindikationen

Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt: Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
 - Bettlägerige Personen
 - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
 - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
 - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung bitte unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich bitte unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie bitte keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, ist kein medizinisches Massageprodukt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung durch den Massagesessel von 30 Minuten. An gleicher Körperstelle sollten Sie höchstens 15 Minuten massieren, da ansonsten eine entgegengesetzte Wirkung auf Grund übermäßiger Massage eintreten kann.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
- Kinder unter 14 Jahren sind zu beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass sie den Massagesessel nicht zum Spielen benutzen.

KONTRAINDIKATIONEN „BRAINTRONICS“

- Psychosen (z.B. Schizophrenie, Bipolare Störung, Endogene Depressionen)
- Persönlichkeitsstörungen
- Epilepsie und ähnliche Anfallserkrankungen
- Herzerkrankungen
- Erkrankungen des zentralen Nervensystems
- Thrombose
- Endogene Depressionen
- ADS (unteraktive)
- Kürzlich vorgefallener Herzinfarkt oder Schlaganfall
- Geistige Behinderung
- Suchterkrankung wie Drogen, Alkohol und Medikamentenabhängigkeit
- Regelmäßige Einnahme von Psychopharmaka
- Schwangerschaft



HINWEIS: Aus ethischen und rechtlichen Gründen sollte braintronics nicht bei Kindern und Jugendlichen ohne ausdrückliche Genehmigung des gesetzlichen Vertreters angewandt werden. Personen die durch Meditation in Glaubenskonflikte kommen könnten, sollten von der Anwendung absehen.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Casada Produkt erfüllt alle Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung und gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Produkt auf der Grundlage der heute verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse verlässlich einsetzbar.

Ausstattung | Funktionen


1. Kopfkissen
2. Bluetooth Lautsprecher
3. Rückenkissen
4. Schnellstart Tasten
5. Sitzkissen
6. Schulter Massage
7. Braintronics® logo LED
8. Armlehne
9. Fernbedienung
10. Seitenteil
11. Fußteil

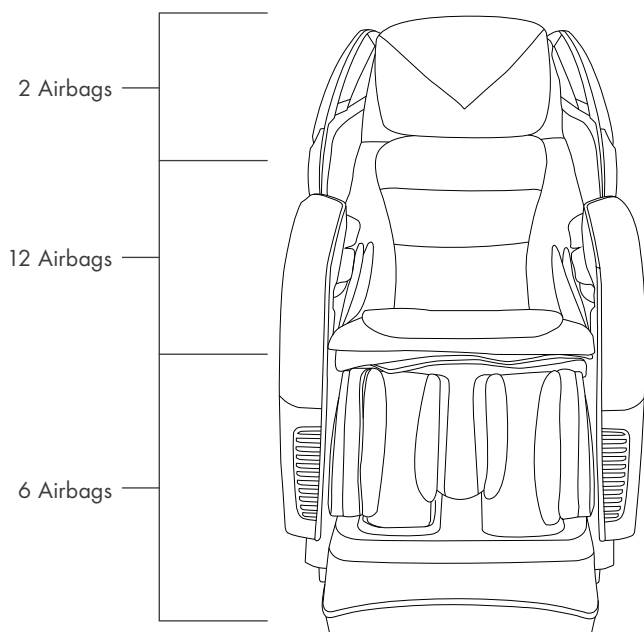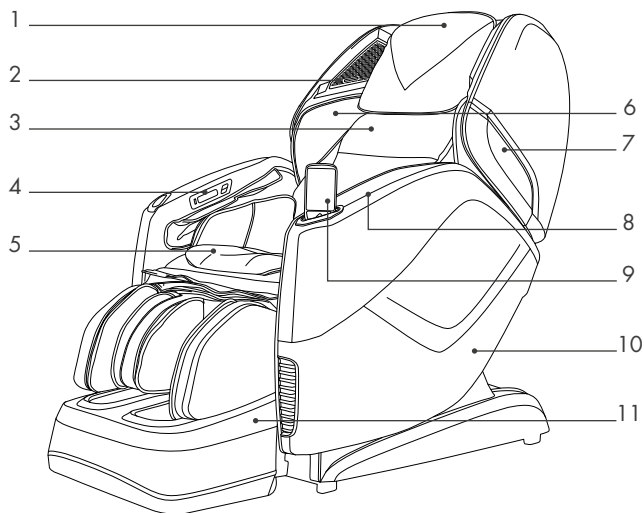

Vorbereitung für den Gebrauch

1. Stellen Sie den Sessel in einem frei zugänglichen Bereich auf

- Zum Verstellen der Rückenlehne genügend Platz um den Sessel herum vorsehen.
- Um Bodenbeschädigungen zu vermeiden und die Geräuschbelastung zu reduzieren, legen Sie bitte einen Teppich unter den Massagesessel.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse an der Vorder- und Rückseite des Sessels befinden.
- Bitte platzieren Sie den Sessel nicht auf nassen oder unebenen Boden.
- Um Signalstörungen zu vermeiden, stellen Sie den Sessel bitte 1 Meter von TV und Radio entfernt auf.
- Vermeiden Sie es, den Sessel direktem Sonnenlicht auszusetzen oder an einem Ort mit hohen Temperaturen aufzustellen. Das Leder könnte andernfalls verblassen oder aushärten.

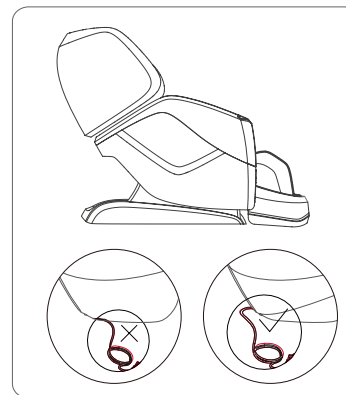


Warnung!

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht unter dem Sessel liegt! Beschädigen Sie das Netzkabel nicht!

2. Sessel verschieben

- Wie in der Abbildung dargestellt, drücken Sie die Rückenlehne nach unten und neigen den Sessel in einem Winkel von 45° in Richtung der Räder.
- Bewegen Sie den Sessel langsam an die gewünschte Stelle.
- Senken Sie den Sessel langsam und sanft ab, bis er völlig eben auf dem Boden steht.

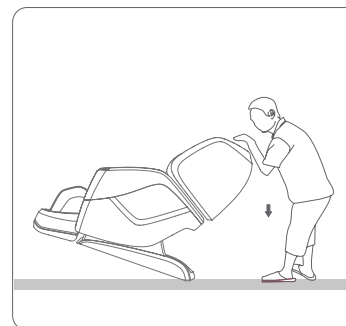

Warnung!

- Bevor Sie den Sessel verschieben, bringen Sie die Fußstütze wieder in ihre Ausgangsposition zurück.
- Bewegen Sie den Sessel nicht, wenn er gerade besetzt oder in Verwendung ist.
- Das Bewegen des Sessels kann zu Schäden am Boden führen. Es wird ein Bodenschutz empfohlen (z.B. Matten oder Teppiche).
- Lassen Sie den Sessel beim Verschieben weder fallen noch plötzlich los, da er dadurch beschädigt werden kann.
- Wir empfehlen, dass beim Umsetzen des Sessels zwei Personen anwesend sein sollten und besondere Vorsicht geboten ist.

Fernbedienung

ON / OFF TASTE

TOUCH DISPLAY HAUPTBILDSCHIRM

SENSORTASTEN



Touch Display Fernbedienung

1. EIN/AUS-Taste

(auf der Oberseite der Fernbedienung)

- Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel zu starten. Rückenlehne und Fußstütze des Massagesessels werden automatisch in die Startposition gefahren. Auf dem Display erscheint der Hauptbildschirm.
- Durch nochmaliges Drücken dieser Taste, stoppen alle Massagefunktion. Der Massagemechanismus, die Rückenlehne und die Fußstütze kehren in ihre Ausgangsposition zurück. Der Massagesessel ist nicht mehr im Betrieb.

2. Hauptbildschirm

Es stehen 6 Massagebetriebsarten zur Verfügung:

- Nacken/Schulter
- Unterer Rücken
- Auto
- Manuell
- Erweitert
- Luftdruckmassage

Einstellungen:

Diese Option wird in der oberen rechten Ecke der Hauptseite im Display angezeigt.

Fernbedienung


SENSORTASTEN

Hauptbildschirm: Drücken Sie diese Taste, um zur Hauptseite des Menüs zurückzukehren.

Drücken Sie diese Taste, um die verschiedenen Positionen des Massagesessels und die Zero G Einstellung auszuwählen.

Zurücksetzen: Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel wieder in seine Ausgangsposition zu bringen.

AUTO: Drücken Sie diese Taste, um die Massagebetriebsart "Automatik" zu starten (die Standardeinstellung ist "Demo" Massage).

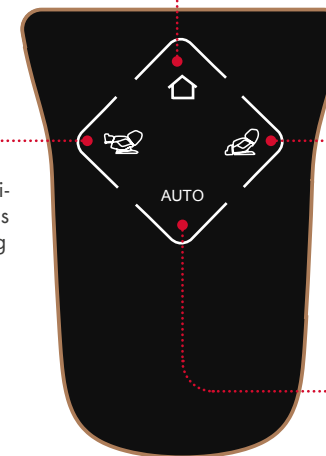

Aufbau und Montage

1| ENTFERNEN SIE BITTE DIE VERPACKUNG UND NEHMEN SIE DIE TEILE HERAUS

Inbusschlüssel 1x

Netzkabel 1x



Sechskantschrauben 10x
Unterlegscheibe 10x
(Ersatz: Sechskantschrauben 2x,
Unterlegscheibe 2x)

Verschlusskappen 2x

Aufbau und Montage



1.1| Um die Montage zu beginnen, entfernen Sie zuerst die Abdeckung der Seitenteile, indem Sie am Stoffstreifen ziehen.



Stoffstreifen Seitenabdeckung

1.2| Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Hauptschalter ein, so dass der Sessel in seine Ausgangsposition fährt.



Sesselposition vor der Stromversorgung

Sesselposition nach der Stromversorgung


2| MONTAGE DES FUSSTEILS

Verbinden Sie das Anschlusskabel der Fußstütze sowie den Luftschlauch



Aufbau und Montage

2.1| Befestigen Sie die Fußstütze am Sitzteil und fixieren Sie es dann mit dem Verschlusselement.

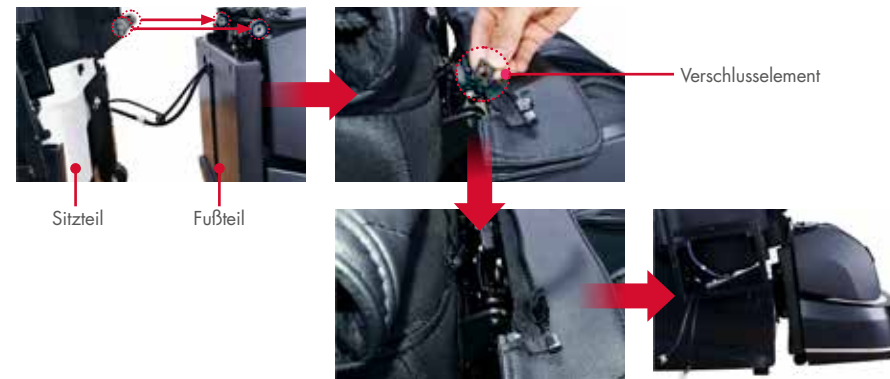


3| MONTIEREN DER SEITENTEILE

Richten Sie das Seitenteil (A) am Massagesessel (B) aus. Dann stecken Sie das Seitenteil an den Massagesessel.



3.1| Das Kabel und der Luftschlauch müssen durch die Durchführung gezogen und mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden werden.

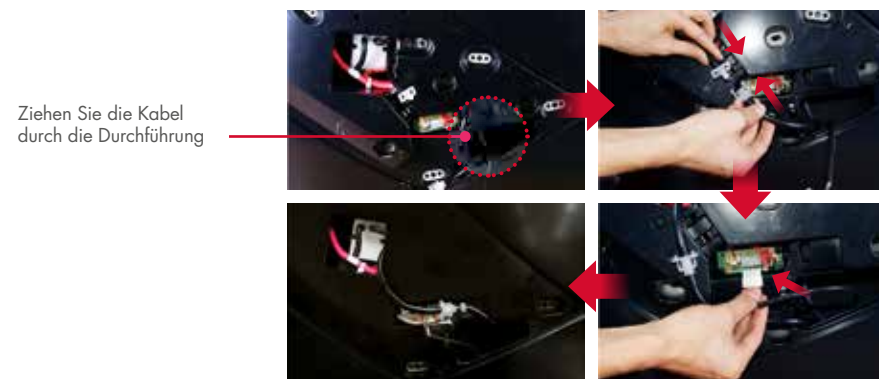

Aufbau und Montage

3.2| Befestigen Sie das Seitenteil mit Hilfe von vier Schrauben.



3.3| Um die Seitenabdeckung wieder zu befestigen, klopfen fest mit der Hand an die Kanten des Seitenteils.



4| SITZPOLSTER ANBRINGEN

Befestigen Sie den Reißverschluss zwischen der Sitzfläche und der Fußstütze.



4.1| Das Sitzpolster wird mit einem Reißverschluss an der rechten und linken Seite befestigt.



4.2| Das Sitzkissen wird mit Hilfe des Klettverschlusses an der Rückenlehne befestigt.

Reinigung | Pflege | Lagerung

A| REINIGEN DES KUNSTLEDERS

Das Kunstleder mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Bitte nicht mit Lösungen reinigen, die Chemikalien wie Verdünnungsmittel, Benzin und Alkohol enthalten. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsmittel das Kunstleder nicht beschädigt. Bitte lesen Sie die Anwendungshinweise des Reinigers aufmerksam. Wenn das Kunstleder stark verschmutzt ist, reinigen Sie es wie folgt:

1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit heißem Wasser oder einem handelsüblichen neutralem Waschmittel und wringen Sie es aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Tuch gut ausgewrungen ist.
3. Reinigen Sie die Oberfläche des Kunstleders mit dem Tuch.
4. Achten Sie darauf, dass Sie das Tuch beim Abwischen mehrmals ausspülen.
5. Lassen Sie das Kunstleder auf natürliche Weise trocknen. Nicht mit dem Föhn trocknen.

- Die Oberfläche des Kunstleders kann bei Verwendung eines ungeeigneten Reinigungsmittels verblassen oder verfärben. Testen Sie die Reinigungslösung in einem kleinen Abschnitt, bevor Sie sie vollständig auftragen.
- Die Reinigung des Kunstleders mit Alkohol, Verdüner oder benzinhaltigen Mitteln, kann zu Verfärbungen oder zum Abtragen der Farbe insgesamt führen.

B| DIE REINIGUNG VON PLASTIKTEILEN

1. Ein weiches Tuch in warmes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel geben, gut auswringen und die Plastikteile abwischen.
2. Reinigen Sie die Plastikteile nicht mit Chemikalien wie Verdünnern, Benzin und Alkohol.
3. Mit einem in sauberem Wasser ausgewrungenen Mikrofasertuch oder weichen Tuch abwischen.
4. Die Plastikteile an der Luft trocknen lassen.

C| LAGERUNG

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, dann sollte das Stromkabel aufgewickelt werden und das Gerät sollte in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie das Gerät niemals bei hoher Temperatur oder in der Nähe von offenem Feuer auf, vermeiden Sie eine langfristige Aussetzung unter Sonnenlicht.
- Verwenden Sie bei der Reinigung bitte nur handelsübliche Kunstlederpflege. Reinigen Sie es zu keiner Zeit mit Verdüner, Benzol oder Alkohol.
- Steht das Gerät auf einer ungeraden Fläche, dann rollen oder schieben Sie es nicht; heben Sie es, um es zu bewegen.
- Bitte machen Sie nach der Benutzung Pausen und benutzen Sie das Gerät nicht mehrere Male ohne Unterbrechung hintereinander.

Störungssuche

STÖRUNG	ERKLÄRUNG
<ul style="list-style-type: none">• Bei Betrieb ertönt das Geräusch des Motors.	<ul style="list-style-type: none">• Es ist ein normales Betriebsgeräusch.
<ul style="list-style-type: none">• Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in die Steckdose gesteckt und dass der Stromschalter angeschaltet wurde. Überprüfen Sie das Kabel der Fernbedienung.
<ul style="list-style-type: none">• Das Gerät stellt den Betrieb ein.	<ul style="list-style-type: none">• Nach Erreichen der voreingestellten Laufzeit oder nach zu langer Nutzungsdauer schaltet sich der Sessel automatisch ab. So wird die längere Lebensdauer des Sessels gesichert.
<ul style="list-style-type: none">• Braintronics-Programme lassen sich nicht starten.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die braintronics-App installiert und Ihr Konto aktiviert ist. Kontrollieren Sie außerdem, ob eine Bluetooth®-Verbindung zwischen Smartphone und Massagesessel besteht.

Technische Daten

Maße: aufrecht: 155(L)x81(W)x122(H) cm
 liegend: 202(L)x81(W)x119(H) cm

Gewicht: 111 kg

Max. Belastung: 120 kg

Spannung: AC220-240V 50-60Hz

Nennleistung: 250 W

Laufzeit: 15 Minuten

braintronics: 21 Minuten

Zertifikate:



EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada Austria

www.casada-austria.at

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.
Copyright © 2020 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

